
STAALNAME - WANGWISSER

Opgesteld door: Matthias Decoster

Beoordeeld door: DOC Manager Laboratoriumgeneeskunde, Verantwoordelijken WP
bloedafnamedienst, Verantwoordelijken WP pre- & post-analyse

Goedgekeurd door: Verantwoordelijk KB Cytogenetica van hematologische aandoeningen,
Verantwoordelijk KB Moleculaire hematologie (NGS), Verantwoordelijk KB Moleculaire hematologie
(PCR) + moleculaire Immuno-hematologie, Verantwoordelijk KB Monsterafname (labo & ziekenhuis) en
aderlating

1. DOELSTELLING

Dit protocol beschrijft de procedure voor afname van een wangwisser (BD ProbeTec™ ET).

2. TOEPASSINGSGBIED

Deze SOP is van toepassing voor Campus SFX; SJ / Medische zorgen; Chirurgische verpleegafdelingen; Dagziekenhuizen; Geriatrische verpleegafdelingen; Intensieve zorgen en spoedgevallen; Interne verpleegafdelingen; Kinderafdelingen; Maternale verpleegafdelingen; Operatiekwartier; Psychiatrische verpleegafdelingen; Revalidatie verpleegafdelingen

Deze SOP is bestemd voor verpleegkundigen en vroedvrouwen.

3. DEFINITIES EN AFKORTINGEN

Zie document [AZKBDIN00017](#) "Lijst algemeen gebruikte afkortingen".

Zie document [AZKBDIN00018](#) "Lijst algemeen gebruikte definities".

4. PRINCIPE

Deze procedure beschrijft de werkwijze voor afname van een wangwisser (BD ProbeTec™ ET). Door met een wisser langs de wang te glijden, wordt er wangepitheel losgemaakt. Vanuit deze epitheelcellen kan er DNA geïsoleerd worden, welke gebruikt wordt voor het uitvoeren van bepaalde moleculaire DNA analyses indien er onvoldoende witte bloedcellen aanwezig zijn in het perifeer bloed.

5. BENODIGDHEDEN

Wangwisser BD ProbeTec™ ET	Plastiektzakje (om staal en aanvraagbrief samen te bewaren/versturen)
Aanvraagformulier	

6. VEILIGHEID EN MILIEU

Er moet gewerkt worden volgens de geldende richtlijnen van de op het laboratorium gehanteerde algemene veiligheidsvoorschriften (zie SOP [AZKBAPR00007](#)).

7. PROCEDURE

7.1 Indicaties

Moleculaire DNA onderzoeken: HLA typering of uitsluiten van constitutionele afwijkingen.

7.2 Contra-indicaties

Nihil

7.3 Mogelijke verwikkelingen

Nihil

7.4 Werkwijze

7.4.1 Voorbereiding

- Handhygiëne
- Trek niet-steriele handschoenen aan.

7.4.2 Uitvoering


- Laat de patiënt kort de mond spoelen met water.
- Haal de wangwisser uit de verpakking. De dikke witte wisser wordt niet gebruikt (gooi deze in een gele afvalcontainer). De wisser in de beschermbuis met roze dop wordt gebruikt voor afname.



Deze wisser
niet gebruiken

Deze wangwisser gebruiken
voor afname

- Wrijf grondig met de wisser van boven naar onder en doe dit ongeveer 10-20 seconden op de binnenkant van iedere wang. Maak ondertussen een draaibeweging met de wisser en plaats deze terug in de beschermbuis.

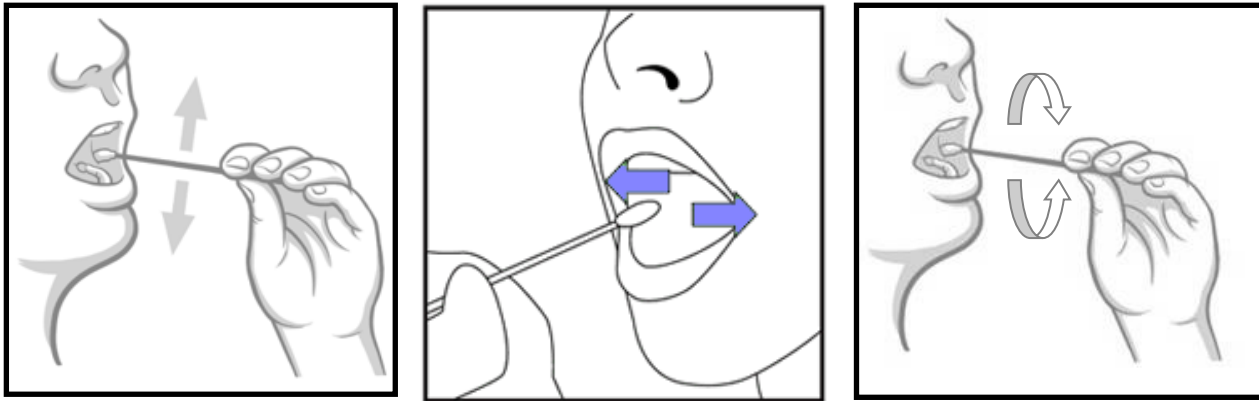

7.4.3 Nazorg

- Zorg voor correcte labelling (zie Procedure 'Indienen laboratoriumaanvragen')
- Voor transport naar het labo worden de stalen per patiënt verpakt in een plastic zakje met de geplooidde aanvraagbrief in het zijzakje.

Het staal dient binnen de 48u na staalafname in het laboratorium aanwezig te zijn.
De wisser mag op kamertemperatuur of koelkasttemperatuur (2°-8°C) bewaard te worden.

7.4.4 Rapportage

NVT

8. OPMERKINGEN

Het wordt aangeraden om de wissers, na afname, kort te laten drogen vooraleer ze terug te steken in het omhulsel. Dit beperkt bacteriegroei en bevordert de bewaring van de cellen.

9. NOODPROCEDURE

NVT

10. VERWIJZINGEN

Nummer	Titel
AZKBDIN00017	Lijst algemeen gebruikte afkortingen
AZKBDIN00018	Lijst algemeen gebruikte definities
AZKBAPR00007	Veiligheidshandboek