



Monsterafname van nasofarynx en keel voor COVID-19 en andere respiratoire virussen (Edoc)

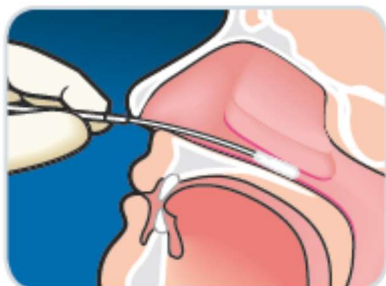

Stap 1

Laat voor de monsterafname met de patiënt de neus snuiten in een wegwerp zakdoekje. Buig het hoofd van de patiënt lichtjes achterover

Breng de **dunne wisser** horizontaal in het neuskanaal tot een lichte weerstand wordt waargenomen. Bij volwassenen en grotere kinderen is dit ongeveer de helft van de afstand tussen de basis van de neus en de oorlel.

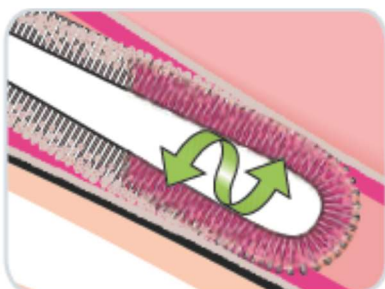


Stap 2

Draai de wisser 2 tot 3 keer en houdt de wisser 5 seconden ter plaatse, zodat celmateriaal maximaal geabsorbeerd wordt. Indien er geen mucus op de wisser aanwezig is kan de monsterafname eventueel via het andere neuskanaal uitgevoerd worden.



Stap 3

Breng de wisser in het transportmedium en breek de schacht aan de merkstreep.

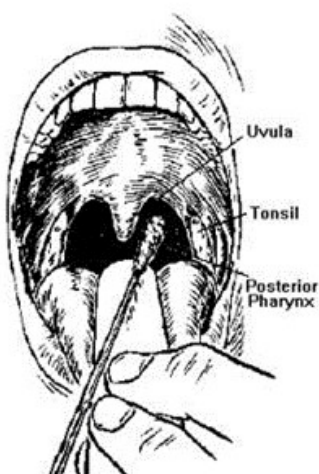

Stap 4

Voor afname van de keelwisser, vraag de patiënt om diep in te ademen. Druk de tong met behulp van een tongspatel goed naar beneden. Vraag de patiënt om "AH" te prononceren.

Stap 5

De **dikke wisser** wordt tot achter de uvula en tussen de tonsillen gepositioneerd. Vermijd contact met de laterale wanden van de mondholte en met de tong. De wisser moet minstens éénmaal rondgedraaid worden en even van voor naar achter bewogen worden over de posterieure farynx.

Stap 6

Na staalafname moet de wisser onmiddellijk in het transportmedium gestopt worden samen met de nasofaryngeale wisser en breek de schacht aan de merkstreep. Sluit vervolgens de transporttube goed af om lekkage te voorkomen. Label de transporttube met een staalvignet waarop minstens naam, voornaam én geboortedatum staat. Schud de transporttube voorzichtig een aantal keer.